



Medizinprodukte Katalog



Bestellung und Information:
office@aaronclean.at

www.aaronclean.at



Herzlich Willkommen!

Das Unternehmen aaronclean wurde 2009 von Dominik Aaron Haider als Brancheninsider im Bereich Gesundheitswesen gegründet. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Gesundheits- und Krankenpfleger bringt er im Zuge seiner Kundenbetreuungen seine Fachexpertise ein.

Unsere Produktbereiche:

Ganzheitliches Hygienemanagement

Als Partner der Chemischen Fabrik Dr. Weigert liefern wir hochwertige Reinigungs- und Desinfektionsprodukte, darunter bewährte Lösungen wie neodisher.

Professionelles Entsorgungsmanagement

Für die sichere Sammlung medizinischer Abfälle bieten wir geprüfte Lösungen rund um die Gelbe Tonne – mit zertifizierten Entsorgungsboxen von AP Medical.

Endoskophalterungen

Unsere speziell entwickelten Endoskophalterungen gewährleisten eine technisch sichere und hygienisch optimierte Lagerung sensibler Endoskope.





Produktkategorien

Seite 6

Endoskopie

- Endoskophalterung
- Koloskopie-Hosen

Seite 8

Entsorgungsmanagement

- Entsorgungsboxen
- Müllbeutel

Seite 12

Medizinmöbel

- Blutentnahmestühle
- Drehrollhocker
- Infusionsständer
- Praxisliegen
- Spritzenspender
- Vielzweckwagen

Seite 22

Schutzbekleidung

- Nitrilhandschuhe

Seite 23

Verbandstoffe

- Pflaster
- Zellstofftupfer

Seite 24

Zellstoffe

- Ärzterollen
- Falthandtücher
- Toilettenpapier
- Küchenrollen

Seite 26

Diagnostik

- Becher
- Holzmundspatel
- Nierenschalen
- Pipetten
- Stuhlröhrchen
- Urinbecher
- US-Gel

Seite 28

Reinigung & Desinfektion



Endoskopie



Artikelnummer: RM.AHAID.ER-6/7/8

Endoskophalterung

Abmessung: 280x235 mm

Material: Edelstahl

Inklusive Befestigungsmaterial

Unsere Endoskophalterungen garantieren eine technisch sichere und hygienisch optimierte Lagerung Ihrer sensiblen Endoskope.

Artikelnummer: DS-L-ECO

Koloskopiehosen XL

Farbe: Dunkelblau

Größe: XL 120x65cm

Verpackungseinheit: VE: 100.Stück

Material: PP-Vliesstoff (Polypropylen)

Einzeln steril verpackt

Hoch beständig und feuchtigkeitsabweisend

Elastischer Gummizug

Rückseitige Untersuchungsöffnung





Entsorgungsboxen



Artikelnummer: PBS-0,6

Entsorgungsbox 0,6.Liter

Durchmesser: 10cm

Höhe: 14,5cm



Artikelnummer: PBS-2

Entsorgungsbox 2.Liter

Durchmesser: 14cm

Höhe: 21cm



Artikelnummer: CS-4

Entsorgungsbox 4.Liter

Breite: 16,7cm

Länge: 16,7cm

Höhe: 24,7cm



Artikelnummer: CS-6

Entsorgungsbox 6.Liter

Breite: 16,7cm

Länge: 16,7cm

Höhe: 39cm



Artikelnummer: SB25

Entsorgungsbox 25.Liter

Breite: 30cm

Länge: 40cm

Höhe: 26cm



Artikelnummer: I008

Entsorgungsbox 50.Liter

Breite: 30cm

Länge: 40cm

Höhe: 56cm



Artikelnummer: I005

Entsorgungsbox 60.Liter

Breite: 30cm

Länge: 40cm

Höhe: 65cm



Müllbeutel



Artikelnummer: 10042

Schwerlast-Abfallsäcke 120.Liter

Volumen: 120.Liter
Farbe: Blau
Material: LDPE
Länge: 1100mm
Breite: 700mm
Dicke: 0,05mm



Artikelnummer: 94028

Müllbeutel 60.Liter

Volumen: 60.Liter
Farbe: Grau
Material: LDPE
Länge: 800mm
Breite: 600mm
Dicke: 0,05 mm
Ohne Zugband



Artikelnummer: 18002

Müllbeutel 120.Liter

Volumen: 120.Liter
Farbe: Orange
Material: LDPE
Länge: 1100mm
Breite: 700mm
Dicke: 0,05 mm
Ohne Zugband



Artikelnummer: 59903

Müllbeutel 60.Liter

Volumen: 60.Liter
Farbe: Transparent
Material: HDPE
Länge: 750mm
Breite: 620mm
Ohne Zugband



Artikelnummer: 56035

Müllbeutel 45.Liter

Volumen: 45.Liter
Farbe: Weiß
Material: HDPE
Länge: 700mm
Breite: 550mm
Dicke: 0,011mm
Ohne Zugband



Artikelnummer: 59815

Müllbeutel 10.Liter

Volumen: 10.Liter
Farbe: Transparent
Material: HDPE
Länge: 440mm
Breite: 320mm
Ohne Zugband



Artikelnummer: 94118

Müllbeutel 180.Liter

Volumen: 180.Liter
Farbe: Grau
Material: LDPE
Länge: 1200mm
Breite: 500+400mm
Dicke: 0,05 mm
Ohne Zugband



Artikelnummer: 06028

Biomüllbeutel 20.Liter

Volumen: 20.Liter
Farbe: Natur
Material: Biofolie
Länge: 500mm
Breite: 430mm
Dicke: 0,018 mm
Ohne Zugband

Artikelnummer: 06065

Biomüllbeutel 10.Liter

Volumen: 10.Liter
Farbe: Natur
Material: Biofolie
Länge: 500mm
Breite: 220+180mm
Dicke: 0,018 mm
Ohne Zugband



Medizinmöbel



Artikelnummer: 529726

Infusionsflaschenhalterung

Mehrfachaufhänger (Metall) für

Glasinfusionsflaschen

Länge: 33cm

Artikelnummer: 40972CX-35

Blutentnahmestuhl Haemo-Linea Cuneo

Farbe: Weiß

Material: Kunstleder

Höhe: 81cm, Breite: 51cm, Tiefe: 51cm; Sitz: 45x47cm

Tragkraft: 400kg

Ausstattung:

Armauflage / Keilkissen aus Integralschaum

Gestelloberfläche: verchromt

Standards: CE-Konformität, FMVSS 302,
OEKO-TEX Standard 100 Kl. 1 (Kunstleder)



Artikelnummer: 40361CM-35

Blutentnahmestuhl Haemo-Flexa Cuneo Mobil

Farbe: Weiß

Material: Kunstleder

Höhe: 106cm, Breite: 73cm, Tiefe: 80cm; Sitz: 53x51cm

Tragkraft: 600kg

Ausstattung:

Armauflage / Keilkissen aus Integralschaum

Mobil mit Doppelrollen

Fußpolster Verstellung: Gaslift

Fußpolster Verstellwinkel: -90 bis 0


Rückenpolster Verstellung: Gaslift

Rückenpolster Verstellwinkel: -5 bis +85

Gestelloberfläche: gepulvert, grauweiß RAL 9002

Standards: CE-Konformität, FMVSS 302

OEKO-TEX Standard 100 Kl. 1 (Kunstleder)

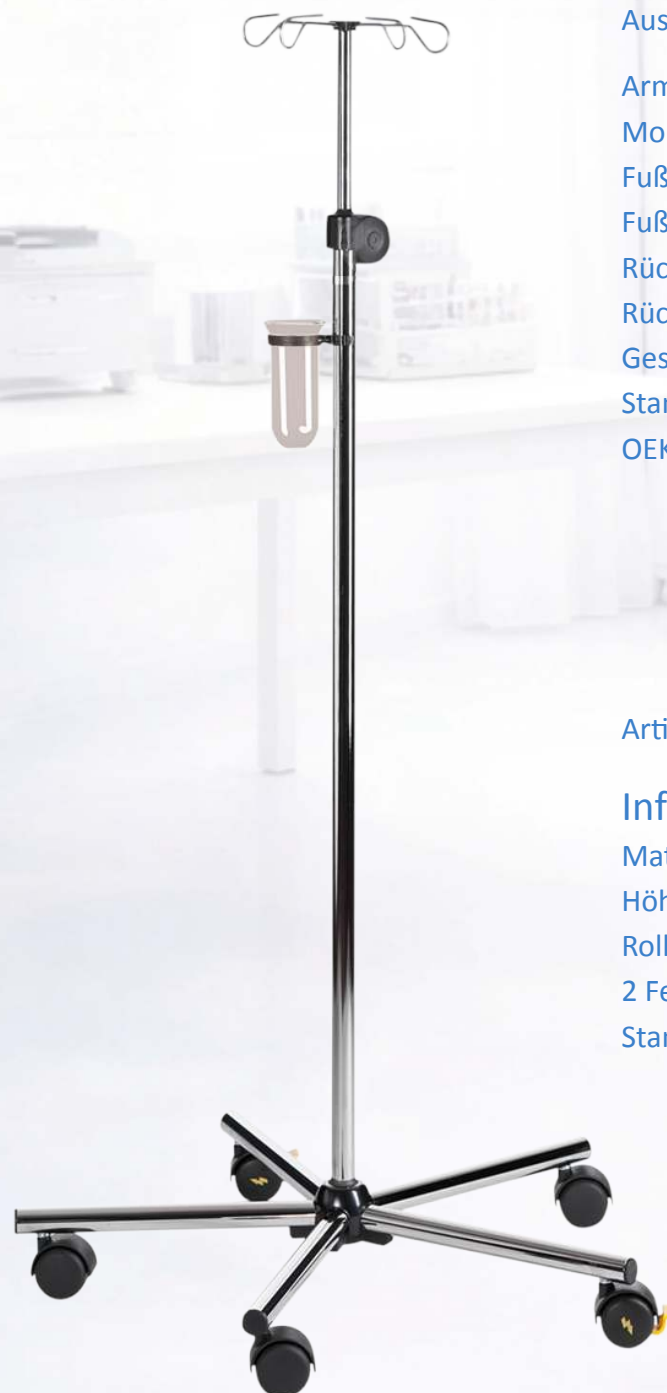

Artikelnummer: BS4044+SH2-S

Infusionsständer

Material: Verchromt, Edelstahl (elektropoliert)

Höhenverstellung: 126cm bis 215cm

Rollen: Doppelrolle (Gleitlager) ø 50 mm mit

2 Feststellbremsen, elektrisch leitfähig, schwarz

Standards: CE-Konformität, Edelstahl Rostfrei





Artikelnummer: 134965

Kanülen- und Spritzenspender 5-Fach

Anzahl Schütten: 5

Abmessung: 60 x 16,4/11 cm (B x H x T)

Farbe: Weiß

- Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol
- Mit transparenten, stabilen Klarsichtboxen



Artikelnummer: 6985

Vielzweckwagen Variocar-60

Ausstattung:

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Injektionsset PicBox multi mit weißen Kunststoffgehäuse inkl. Konsolenträger
- 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320mm

Rollen: 4 Rollen Ø 75 mm (2 feststellbar)

Breite: 629mm, Tiefe: 451mm, Höhe: 733mm

Höhe mit Injektionsset:

1335mm



Artikelnummer: 134964

Kanülen- und Spritzenspender 4-Fach

Anzahl Schütten: 4

Abmessung: 60 x 20,7/13,7 cm (B x H x T)

Farbe: Weiß

- Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol
- Mit transparenten, stabilen Klarsichtboxen

Artikelnummer: 134963

Kanülen- und Spritzenspender 3-Fach

Anzahl Schütten: 3

Abmessung: 60 x 24,2/16,3 cm (B x H x T)

Farbe: Weiß

- Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol
- Mit transparenten, stabilen Klarsichtboxen



Artikelnummer: 5970HMR4-35

Drehrollhocker Sella-Med Manus Work

mit Rückenlehne

Farbe: Weiß, Material: Kunstleder

Sitzhöhe: 56cm bis 74cm, Polstergröße: ø 37cm

Tragkraft: 200kg

Rollen: Doppelrolle (Gleitlager) ø 50 mm

intervallgebremst, schwarz

Standards: FMVSS 302

OEKO-TEX Standard 100 Kl. 1 (Kunstleder)



Artikelnummer: 5912RMX4-35

Drehrollhocker Sella-Med

Laudatio Corona Midi

Farbe: Weiß, Material: Kunstleder

Sitzhöhe: 47cm bis 60cm, Polstergröße: ø 37cm

Tragkraft: 200kg

Rollen: Doppelrolle (Gleitlager) ø 50 mm intervallgebremst, schwarz

Standards: FMVSS 302, OEKO-TEX Standard 100 Kl. 1 (Kunstleder)





ECO Praxisliege

höhenverstellbar von 60 bis 90 cm

Pulverbeschichtetes Gestell (RAL 7035) von größter Stabilität

Elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbar von 60 –90 cm

60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug laut Farbmusterkarte

Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)

Kopfteil mit 2-facher Rastermechanik

Feststehend oder fahrbar mit arretierbaren Doppelrollen (Ø100mm)

Sicherheitsfusschalter verhindert unbeabsichtigtes Betätigen



Fußpedal beidseits der Liege
bei hydraulischer Ausführung



arretierbare Doppelrollen



Sicherheitsfusschalter



Kopfteil mit 2-facher Rastermechanik



in verschiedenen Farb-Varianten lieferbar - siehe Farbcode-Tabelle





ECO Praxisliege

Standard



Hydraulisch, feststehend			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			340. 600
195 x 80 x 60 - 90 cm			340. 800
Hydraulisch, fahrbar			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			340. 601
195 x 80 x 60 - 90 cm			340. 801
Elektrisch, feststehend			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			330. 600
195 x 80 x 60 - 90 cm			330. 800
Elektrisch, fahrbar			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			330. 601
195 x 80 x 60 - 90 cm			330. 801

ECO Praxisliege

Kopf- und Fußteil verstellbar



Hydraulisch, feststehend			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			341. 600
195 x 80 x 60 - 90 cm			341. 800
Hydraulisch, fahrbar			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			341. 601
195 x 80 x 60 - 90 cm			341. 801
Elektrisch, feststehend			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			331. 600
195 x 80 x 60 - 90 cm			331. 800
Elektrisch, fahrbar			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			331. 601
195 x 80 x 60 - 90 cm			331. 801


ECO Praxisliege

80cm langer Kopfteil



Hydraulisch, feststehend			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			343. 600
195 x 80 x 60 - 90 cm			343. 800
Hydraulisch, fahrbar			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			343. 601
195 x 80 x 60 - 90 cm			343. 801
Elektrisch, feststehend			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			333. 600
195 x 80 x 60 - 90 cm			333. 800
Elektrisch, fahrbar			
Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.
195 x 65 x 60 - 90 cm			333. 601
195 x 80 x 60 - 90 cm			333. 801

Zubehör für ECO Praxisliege

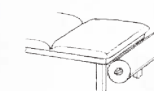

Papierrollenhalter

850. 000



Nasenschlitz

851. 000




OP-Schiene 500 mm fix montiert
OP-Schiene 1000 mm fix montiert

856. 000
856. 001




Infusionshalter höhenverstellbar mit Kloben für OP-Schiene

852. 001

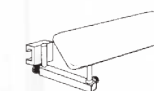


Armauflage mehrfach verstellbar mit Kloben für OP-Schiene

853. 001

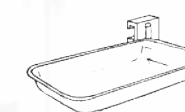

Edelstahlschwenkschale mit Kloben für OP-Schiene

854. 001

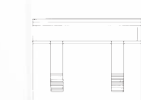

Zusätzlicher Fußschalter für elektr. Höhenverstellung

880. 001

Farbcode-Tabelle

für Polsterung

Fügen Sie den gewünschten
Farbcode an das Ende der
Bestellnummer.

11	12
16	21
22	24
26	33
35	43
44	45
46	48



Praxisliege

für Untersuchung und Behandlung
Gestell aus Formrohr größter Stabilität,
pulverbeschichtet nach RAL 7035, Fü.e querverstrebt
60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug nach Farbmusterkarte
Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
Kopfteil mit doppeltem Verstellbeschlag

Lieferung zerlegt im Karton



in verschiedenen Farb-Varianten lieferbar - siehe Farbcode-Tabelle

Praxisliege



Standard			Bestell-Nr.
Länge	Breite	Höhe	
195 x 65 x 65 cm			120. 665
195 x 65 x 70 cm			120. 670
195 x 65 x 75 cm			120. 675
195 x 65 x 80 cm			120. 680
195 x 80 x 65 cm			120. 865
195 x 80 x 70 cm			120. 870
195 x 80 x 75 cm			120. 875
195 x 80 x 80 cm			120. 880




Kopf- und Fußteil verstellbar			Bestell-Nr.
Länge	Breite	Höhe	
195 x 65 x 65 cm			121. 665
195 x 65 x 70 cm			121. 670
195 x 65 x 75 cm			121. 675
195 x 65 x 80 cm			121. 680
195 x 80 x 65 cm			121. 865
195 x 80 x 70 cm			121. 870
195 x 80 x 75 cm			121. 875
195 x 80 x 80 cm			121. 880




80 cm langer Kopfteil für Ultraschall und Gastroskopie			Bestell-Nr.
Länge	Breite	Höhe	
195 x 65 x 65 cm			123. 665
195 x 65 x 70 cm			123. 670
195 x 65 x 75 cm			123. 675
195 x 65 x 80 cm			123. 680
195 x 80 x 65 cm			123. 865
195 x 80 x 70 cm			123. 870
195 x 80 x 75 cm			123. 875
195 x 80 x 80 cm			123. 880


Zubehör für Praxisliege

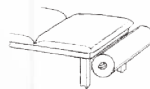

Papierrollenhalter 850. 000

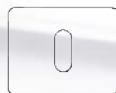


Nasenschlitz 851. 000

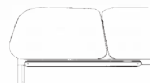

OP-Schiene 500 mm fix montiert 856. 000
OP-Schiene 1000 mm fix montiert 856. 001



Infusionshalter höhenverstellbar mit Kloben für OP-Schiene 852. 001

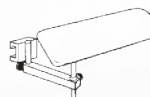

Armauflage mehrfach verstellbar mit Kloben für OP-Schiene 853. 001



Edelstahlschwenkschale mit Kloben für OP-Schiene 854. 001



Rollen 75 mm Ø, 4 Stk. (2 Stk. mit Totalfeststeller) 890. 000
Rollen 75 mm Ø, 4 Stk. mit Totalfeststeller 890. 001
Rollen 100 mm Ø, 4 Stk. (2 Stk. mit Totalfeststeller) 891. 000
Rollen 100 mm Ø, 4 Stk. mit Totalfeststeller 891. 001



Schutzbekleidung



Artikelnummer: 5050040-XS, 5050040-S, 5050040-M, 5050040-L, 5050040-XL

Nitrilhandschuhe

Größe: **X-Small, Small, Medium, Large, X-Large**

Verpackungseinheit: 200.Stück pro Packung

Farbe: blau

Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Form: Beidhändig tragbar

Stulpe: Stulpe mit Rollrand

Unsteril

Puderfrei

Latexfrei

AQL: 1,5

Angewandte Normen: EN 455 (Teil 1-4), ISO 11193-1, EN ISO 21420:2020 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 16523-1:2015 EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, ASTM F1671, ASTM D6978

Chemischen Beständigkeit: gemäß Norm EN 374-3 und EN 16523-1

Verbandstoffe



Artikelnummer: 400441

Injektionspflaster Curaplast Sensitive

Verpackungseinheit: 500.Stück

Größe: 2,5x7,2cm

Wundkissen: 1,5x2,5cm

Farbe: Weiß

Trägermaterial: weißer Vliesstoff aus Polyester, einseitig mit einem Polyacrylatklebstoff beschichtet

Wundkissen: Saugschicht aus Viskose, Polypropylen/Polyethylen und nicht wundverklebenden Netzfolie aus Polyethylen

Abdeckpapier: einseitig silikonisiertes und PE-beschichtetes Papier

Eigenschaften:

weich und anschmiegsam

hautverträglich

passt sich Körperkonturen an

ideal für viel bewegte Körperpartien

bereits fertig zugeschnitten bzw. vorgestanz

atmungsaktiv

Artikelnummer: 13356

Zellstofftupfer Zelletten von der Rolle

Verpackungseinheit: 2 Rollen mit 500 Tupfern im Folienbeutel

Größe: 5x4cm

Anwendung:

zum Auftragen von Salben

zum Abtupfen von Körperflüssigkeiten

bei kleineren Verletzungen

Eigenschaften:

weiß

weich

geruchslos





Zellstoffe



Artikelnummer: 12225-00

Ärztterollen 50cm

Verpackungseinheit: 9 Rollen a 50.Laufmeter

Lagen: 2-lagig



Farbe: Weiß

Breite: 50cm

Perforation: alle 38cm

Punkt-zu-Punkt-Prägung

In einem neuartigen Herstellungsverfahren werden die einzelnen Lagen des Zellstofftuchs an vielen Punkten über die gesamte Fläche miteinander verklebt. So bilden die Lagen eine Einheit und werden äußerst reißfest. Dieses Verfahren kombiniert den Vorteil eines dicken Wischtuchs (Stabilität) mit dem eines mehrlagigen Tuchs (hohe Aufnahmefähigkeit).

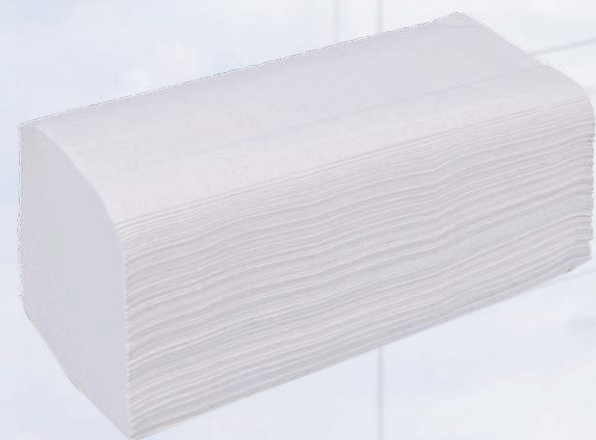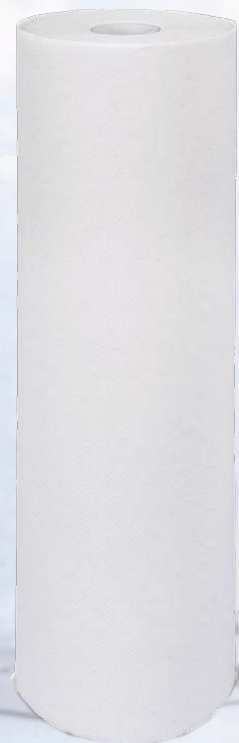

Artikelnummer: 15423-30

Falthandtücher

Verpackungseinheit: 1 Karton = 3150.Tücher

Abmessung: 25 x 23 cm (ausgebreitetes Tuch)

Faltung: V-Falz

Lagen: 2-lagig

Farbe: Hochweiß

Material: Zellstoff

hohe Saugfähigkeit

mit Punkt-zu-Punkt-Prägung



Artikelnummer: 16523-04

Küchenrollen

Verpackungseinheit: 1 Karton = 32.Rollen

Größe: 22x26 cm

Abrisse: 50 pro Rolle

Lagen: 3-lagig

Farbe: Weiß

Material: Zellulose

Perforiert, laminiert u. geprägt

Artikelnummer: 19009-32

Toilettenpapier

Verpackungseinheit: 1 Karton = 64.Rollen

Blatt: 250 pro Rolle

Lagen: 3-lagig

Farbe: Hochweiß

Material: Zellstoff

Perforiert, geleimt u. geprägt





Diagnostik

Artikelnummer: 420115

Nierenschalen aus Edelstahl

Abmessung: 215x145x21mm

Autoklavierbar

Fassungsvermögen: 500ml



Artikelnummer: WX-73205

Mundspülbecher 500ml

Verpackungseinheit: 50.Stück

Volumen: 500ml

Farbe: weiß

mit Eichstrich bei 0,5 l



Artikelnummer: 7020005

Holzmundspatel

Verpackungseinheit: 100.Stück

Abmessung: 150 x 18 x 1,5 mm

Material: Holz

Splitterfrei

Mit glatter Oberfläche

und abgerundeten Kanten



Artikelnummer: 4426

Urinbecher

Verpackungseinheit: 250.Stück

Abmessung: Höhe: 70mm

Ø unten 40mm, Ø oben 55mm

Fassungsvermögen: 120ml

Graduierung: graduert bei 20, 40, 60, 80 und 100ml

Material: Polypropylen

Mit Schraubverschluss montiert einzeln verpackt

hergestellt im Reinraum ISO 8

mattiertes Schreibfeld zum Beschriften

auslaufsicherer und flüssigkeitsdichter,

roter Schraubverschluss mit dreifach Gewinde

druckfest und bruchstabil, stabil und standfest



Artikelnummer: 4040005

Mundspülbecher

Verpackungseinheit: 100.Stück

Volumen: 200ml

Farbe: weiß

Genormte Abmessungen:

geeignet für alle handelsüblichen Becherspender



Artikelnummer: A3151

Pasteurpipetten

Verpackungseinheit: 500.Stück

Volumen: 5 ml - 30 Tropfen = 1 ml

Graduierung: graduert 0,25-0,5-0,75-1,0

Durchmesser: 5,0mm

Länge: 150mm

Material: Polyethylen

Durch thermische Versiegelung der Spitze

können die Pipetten auch zum Transport

kleiner Probenmengen benutzt werden



Artikelnummer: 125092

Ultraschallgel Aquasonic

Inhalt: 250ml

Verpackungseinheit: 12.Stück

Abmessung: Höhe: 70mm, Ø unten 40mm, Ø oben 55mm

Graduierung: graduert bei 20, 40, 60, 80 und 100ml

Material: Polypropylen

Mit Schraubverschluss montiert einzeln verpackt

hergestellt im Reinraum ISO 8

mattiertes Schreibfeld zum Beschriften

auslaufsicherer und flüssigkeitsdichter,

roter Schraubverschluss mit dreifach Gewinde

druckfest und bruchstabil, stabil und standfest

Artikelnummer: 130189

Stuhlröhrchen

Verpackungseinheit: 250.Stück

Größe: Ø 24x70mm

Fassungsvermögen: 17ml

Material: Polypropylen

Entnahmelöffel am Schraubdeckel angesetzt.

Beschreibbar, bedruckbar und etikettierbar

und besitzt einen abgerundeten Boden

mit standfestem Sockel.



Artikelnummer: 7090056

Nierenschalen

Verpackungseinheit: 300.Stück

Abmessung: 250x145x48 mm

Farbe: grau

Formstabil und undurchlässig

Fassungsvermögen: 700 ml



Reinigung & Desinfektion

Anwendungs- und Dosierhilfen

Dosier- und Anwendungshilfen für Kanister und Fässer

Schlüssel aus Kunststoff zum leichten Öffnen von Kanistern und Fässern	Art.-Nr. 9810 07
Kanisterpumpe für 5 L-, 10 L- und 12 kg-Kanister (30 ml Hub)	Art.-Nr. 9807 01
Kanisterpumpe für 20 L- und 20 kg- bis 25 kg-Kanister (30 ml Hub)	Art.-Nr. 9807 00
Handhebelpumpe für Fässer	Art.-Nr. 9803 08
Auslaufhahn für 5 L-, 10 L- und 12 kg-Kanister	Art.-Nr. 9800 04
Auslaufhahn für 20 L- und 20 kg- bis 25 kg-Kanister	Art.-Nr. 9800 03
Auslaufhahn für Fässer	Art.-Nr. 9800 02
neodisher® OXIVARIO Entnahmeverchluss zum Anschluss von neodisher® OXIVARIO (5 L-Kanister) an das Miele Reinigungs- und Desinfektionsgerät	Art.-Nr. 9810 12
Fasstrichter	Art.-Nr. 9803 11
Fasskeil, für eine optimale Restentleerung durch Schrägstellen	Art.-Nr. 9803 12
Fasskarre	Art.-Nr. 9803 10
Auffangwanne für zwei Fässer	Art.-Nr. 0763 90



Persönliche Schutzausrüstung

Schutzhandschuhe	Art.-Nr. 9880 05
Schutzbrille	Art.-Nr. 9880 06
Aufbewahrungsbox	Art.-Nr. 9880 08



Zubehör

Sprühaufsatz	Art.-Nr. 9500 07
Schaumprüher	Art.-Nr. 9500 08
500 ml Messbecher mit Skala	Art.-Nr. 9801 06
1000 ml Messbecher mit Skala	Art.-Nr. 9801 00
Rührlöffel	Art.-Nr. 9802 12
neodisher® test strips (50 Stück)	Art.-Nr. 9813 20
3 L-Desinfektionswanne (mit Siebeinsatz und Deckel)	Art.-Nr. 9611 00
10 L-Desinfektionswanne (mit Siebeinsatz und Deckel)	Art.-Nr. 9611 20
30 L-Desinfektionswanne mit Ablasshahn (mit Siebeinsatz und Deckel)	Art.-Nr. 9611 40



Dosier- und Druckspender für triformin® und weigoman® Produkte

Dosierspender triformin® dispenser 0.5 touchless ¹ für 500 ml-Flaschen	Art.-Nr. 9810 30
Standfuß für triformin® dispenser 0.5 touchless	Art.-Nr. 9810 31
Dosierspender triformin® dispenser 1.0 gold ² für 1 L-Flaschen	Art.-Nr. 9810 51
Dosierspender triformin® dispenser 0.5 gold ² für 500 ml -Flaschen	Art.-Nr. 9810 21
Dosierspender triformin® dispenser 1.0 silver ³ für 1 L-Flaschen	Art.-Nr. 9810 52
Dosierspender triformin® dispenser 0.5 silver ³ für 500 ml -Flaschen	Art.-Nr. 9810 22
Dosierspender triformin® dispenser 1.0 basic ⁴ für 1 L-Flaschen	Art.-Nr. 9810 53
Dosierspender triformin® dispenser 0.5 basic ⁴ für 500 ml -Flaschen	Art.-Nr. 9810 23
Druckspender für 1 L-Flaschen Waschlotion und Händedesinfektionsmittel	Art.-Nr. 9802 00
Druckspender für 0,5 L-Flaschen Waschlotion und Händedesinfektionsmittel	Art.-Nr. 9802 03
Druckspender für 0,5 L-Flaschen triformin® care und triformin® protect	Art.-Nr. 9802 02
Wandhalter für 1 L-Flaschen der weigoman® und triformin® Produkte	Art.-Nr. 9810 56
Wandhalter für 0,5 L-Flaschen der weigoman® und triformin® Produkte	Art.-Nr. 9810 59





Medizinprodukte und Zubehör Vorbehandlung

Vorbehandlung	neodisher® PreStop	neodisher® SeptoPreClean	neodisher® Septo Plus	neodisher® Septo Active
reinigend	●	●	●	●
desinfizierend		●	●	●*
Korrosionsstopp	●			
pH-neutral			●	●
Nassentsorgung	●	●		
kompatibel mit Aldehyden	●		●	●

* auch geeignet zur Schlussdesinfektion semikritischer Medizinprodukte

neodisher® PreStop

Korrosionsstopp mit selbsttätiger Reinigungsleistung – Sprühschaum –

Korrosionsschutzmittel zum Aufsprühen auf chirurgische Instrumente direkt nach der Anwendung im OP. Verhindert Lochkorrosion auf Edelstahlinstrumenten, die durch anhaftende Rückstände von Blut oder physiologischer Kochsalzlösung entstehen können. Erleichtert die nachfolgende Reinigung. Geeignet für chirurgische Instrumente inkl. MIC-Instrumente.

Flaschen 12 x 0,75 L 4086 47



neodisher® Septo PreClean

Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat –

Auf Basis von Aminen – Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (1,5 %, 15 min, 20 °C)

Für die manuelle Reinigung und Desinfektion vor der maschinellen Aufbereitung sowie für die Nassentsorgung über längere Zeiträume, z.B. über Nacht oder über das Wochenende. Mit sehr guter Reinigungswirkung und ausgezeichneter Materialverträglichkeit, nicht proteinfixierend. Frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen (QAV). VAH¹-gelistet und in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen.

Fass 190 kg 4503 13 Flaschen 12 x 1 L 4503 44
Kanister 5 L 4503 35



neodisher® Septo Plus

Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat –

Auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen – Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (1,0 %, 15 min, 20 °C)

Für die manuelle Reinigung und Desinfektion sowie für die desinfizierende Vorreinigung im Tauch- bzw. Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung. Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. Frei von Aldehyden und Aminen. Kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln. VAH¹-gelistet und in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen.

Kanister 5 L 4209 35 Flaschen 12 x 1 L 4209 44



neodisher® Septo Active

Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Granulat –

Auf Basis von Peressigsäure – Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (1,0 %, 5 min, 20 °C), sporizid gegen C. difficile (1,0 %, 15 min, 20 °C)

Für die desinfizierende Vorreinigung im Tauch- oder Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung. pH-neutral. Gute Reinigungsleistung, nicht proteinfixierend. Sehr gute Materialverträglichkeit. Angenehmer Geruch. Frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen (QAV). VAH¹-gelistet, in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen, ÖGHMP³-gelistet.

Eimer 8 kg 4098 76 Eimer 4 x 2 kg 4098 81

Mit den Teststäbchen neodisher® test strips (Art.Nr. 981320) kann die Konzentration der Anwendungslösung überprüft werden.



Bitte beachten Sie vor dem Produkteinsatz die spezifischen Anwendungsparameter und Hinweise zur Materialverträglichkeit.

¹ Verbund für Angewandte Hygiene

² Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

³ Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin

Reinigung	neodisher® MediClean advanced	neodisher® MediClean forte	neodisher® SeptoClean
mildalkalisch/ alkalisch	●	●	●
tensidhaltig	●	●	●
enzymatisch	●	●	
desinfizierend			●
prioninaktivierend			●

Medizinprodukte und Zubehör Maschinelle Reinigung

neodisher® MediClean advanced

Mildalkalischer Universalreiniger – flüssiges Hochkonzentrat – Enthält Alkalitätsspender, Enzyme und Tenside

Hochkonzentrat mit besonders starker Reinigungsleistung bei geringem Produktbedarf. Verleiht dem Instrumentarium Brillanz und Strahlkraft. Entfernt stumpfe Beläge und sorgt somit langfristig für eine optimale Haptik des Instrumentariums. Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung. Exzellente Materialverträglichkeit und damit materialschonend.

Fass

220 kg	4130 13	Kanister*	5 L	4130 33	
Kanister	20 L	4130 26	Kanister*	5 L	4130 35
Kanister	10 L	4130 30	Flaschen	6 x 2 L	4130 42



neodisher® MediClean forte

Mildalkalischer Universalreiniger – Flüssigkonzentrat – Enthält Alkalitätsspender, Enzyme und Tenside

Exzellente Materialschonung, universell einsetzbar. Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut. Vermeidet eine Wiederablagerung von Proteinerückständen. Zur manuellen und maschinellen Reinigung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Container	1000 kg	4050 03	Kanister	10 L	4050 30
Container	600 kg	4050 09	Kanister*	5 L	4050 33
Fass	220 kg	4050 13	Kanister*	5 L	4050 35
Fass mit RFID ⁴	220 kg	4050 14	Flaschen	6 x 2 L	4050 42
Kanister	20 L	4050 26			



neodisher® SeptoClean

Alkalischer Reiniger mit Desinfektionswirkung – Flüssigkonzentrat – Bakterizid, levurozid, viruzid, prioninaktivierend

Der 2-stufige neodisher SeptoClean-Prozess mit nur einer Prozesschemikalie garantiert perfekte Sauberkeit und hygienische Sicherheit. Prioninaktivierend und -dekontaminierend*. Breites mikrobizides Wirkungsspektrum und hohe Materialverträglichkeit. In der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen.

Fass	270 kg	4025 13	Kanister	25 kg	4025 26
Fass mit RFID ⁴	270 kg	4025 14	Kanister	5 L	4025 33



⁴ Radio Frequency Identification

* in zwei verschiedenen 5 L-Kanistern erhältlich: Art. -33 ist für alle maschinellen Prozesse vorzusehen, Art. -35 ist dagegen passend für die Kanisterkonsole der Dosiergeräte für Desinfektionsmittel wieneomatik® medIDOS

** Geprüft gem. Methodenvorschlag von J. Bertram, M. Mielke, M. Beekes, K. Lemmer, M. Baier, G. Pauli: Inaktivierung und Entfernung von Prionen bei der Aufbereitung von Medizinprodukten, Ein Beitrag zur Prüfung und Deklaration geeigneter Verfahren, Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 2004 • 47:36–40



Medizinprodukte und Zubehör Maschinelle Reinigung

Reinigung		neodisher® MediClean	neodisher® MediZym	neodisher® FA	neodisher® Alka 300	neodisher® MA
mildalkalisch/ alkalisch		•		•	•	•
tensidhaltig		•	•			•
enzymatisch		•	•			
aktivchlorhaltig					•	
flüssig		•	•	•	•	

neodisher® MediClean

Mildalkalischer, enzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –

Sehr gute Reinigungswirkung mit perfekter Materialschonung wie sie üblicherweise nur mit pH-neutralen Produkten erreicht wird.

Fass	220 kg	4043 13	Kanister	10 L	4043 30
Kanister	20 L	4043 26	Kanister	5 L	4043 33



neodisher® MediZym

pH-neutraler, enzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –

Materialschonende Reinigung mit Enzymen und reinigungsunterstützenden Komponenten. Entfernt Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut.

Container	600 kg	4040 09	Kanister	10 L	4040 30
Fass	200 kg	4040 13	Kanister	5 L	4040 33



neodisher® FA

Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – Frei von Tensiden und oxidativen Zusätzen

Sehr gute Reinigungswirkung mit hoher Materialverträglichkeit.

Fass	270 kg	4101 13	Kanister	10 L	4101 30
Kanister	25 kg	4101 26	Kanister	5 L	4101 33



Medizinprodukte und Zubehör Maschinelle Reinigung

neodisher® Alka 300

Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – Enthält Aktivchlor

Intensive Reinigungswirkung mit oxidativer Zersetzungskraft für hartnäckige organische Rückstände. Auch zur Anwendung im Dr. Weigert Tuchspendersystem neoform® wipos RTFgeeignet.

Fass	270 kg	3103 13	Kanister	12 kg	3103 30
Kanister	25 kg	3103 26			



neodisher® MA

Alkalischer Reiniger – Pulver – Frei von oxidativen Zusätzen

Sehr gute Reinigungswirkung mit hoher Materialverträglichkeit.

Eimer	10 kg	4107 76	Flaschen	12 x 1 kg	4107 87
-------	-------	---------	----------	-----------	---------



neodisher® OXIVARIO

Reinigungsverstärker – Flüssigkonzentrat – Auf Aktivsauerstoff-Basis

Oxidativ wirkender Reinigungsverstärker zur Entfernung hartnäckiger koagulierter Eiweiß- und Geweberückstände, speziell entwickelt für das Miele OXIVARIO und OXIVARIOPLUS-Verfahren.

Kanister	5 L	4004 33
----------	-----	---------



neodisher® SystemAct

Enzymatische Reinigungskomponente – flüssiges Hochkonzentrat –

Enzymatische Reinigerkomponente zur gemeinsamen Anwendung mit der mildalkalischen Reinigungskomponente neodisher® SystemClean. Erstklassige Reinigungsleistung aufgrund der individuell anpassbaren Kombination aus Alkali- und Enzymkomponente. Sehr gute Materialschonung, hohe Eloxalschonung. Die Dosierung erfolgt über das speziell für die Dosierung von Hochkonzentraten entwickelte Komponentendosiersystem weigomatic® system ALPHA.

Kanister mit RFID ⁴	2 x 5 L	4023 37
--------------------------------	---------	---------



neodisher® SystemClean

Mildalkalische Reinigungskomponente – flüssiges Hochkonzentrat –

Mildalkalische Reinigerkomponente zur gemeinsamen Anwendung mit der enzymatischen Reinigungskomponente neodisher® SystemAct. Erstklassige Reinigungsleistung aufgrund der individuell anpassbaren Kombination aus Alkali- und Enzymkomponente. Sehr gute Materialschonung, hohe Eloxalschonung. Die Dosierung erfolgt über das speziell für die Dosierung von Hochkonzentraten entwickelte Komponentendosiersystem weigomatic® system ALPHA.

Kanister mit RFID ⁴	2 x 5 L	4024 37
--------------------------------	---------	---------





Medizinprodukte und Zubehör Maschinelle Desinfektion

Desinfektion	neodisher® SeptoClean	neodisher® Septo DN
bakterizid	●	●
tuberkulozid		●
mykobakterizid		●
levurozid	●	●
fungizid		●
viruzid	●	●
prioninaktivierend	●	

neodisher® SeptoClean

**Alkalischer Reiniger mit Desinfektionswirkung – Flüssigkonzentrat –
Bakterizid, levurozid, viruzid, prioninaktivierend**

Der 2-stufige neodisher SeptoClean-Prozess mit nur einer Prozesschemikalie garantiert perfekte Sauberkeit und hygienische Sicherheit. Prioninaktivierend und -dekontaminierend*. Breites mikrobizides Wirkungsspektrum und hohe Materialverträglichkeit, besonders geeignet für die vereinfachte Aufbereitung von thermolabilen Medizinprodukten. In der IHO₂-Desinfektionsmittelliste eingetragen.

Fass	270 kg	4025 13	Kanister	25 kg	4025 26
Fass mit RFID ⁴	270 kg	4025 14	Kanister	5 L	4025 33



neodisher® Septo DN

**Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat –
Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid**

Besonders geruchsarm durch eine spezielle Wirkstoffkombination. Geringeres Inhalationsrisiko als bei marktüblichen Desinfektionsmitteln mit höherem Glutardialdehyd-Anteil. In der IHO₂-Desinfektionsmittelliste eingetragen.

Fass	200 kg	4010 13	Kanister	10 L	4010 30
Kanister	20 L	4010 26	Kanister	5 L	4010 33



Neutralisation	neodisher® N	neodisher® Z	neodisher® SystemSpecial
sauer	●	●	●
tensidfrei	●	●	●
phosphatfrei		●	●
empfindliche Materialien		●	●

Medizinprodukte und Zubehör Neutralisation

neodisher® N

**Saures Neutralisationsmittel – Flüssigkonzentrat –
Auf Basis von Phosphorsäure. Frei von Tensiden**

Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste sowie zur Entfernung von Kalk oder anderen säurelöslichen Rückständen bei der maschinellen Aufbereitung.

Container	1000 kg	4201 03	Kanister	12 kg	4201 30
Fass	290 kg	4201 13	Kanister	5 L	4201 33
Kanister	25 kg	4201 26	Flaschen	12 x 1 L	4201 87



neodisher® Z

**Saures Neutralisationsmittel – Flüssigkonzentrat –
Auf Basis organischer Säuren. Frei von Tensiden und Phosphaten**

Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste bei der maschinellen Aufbereitung.

Fass	240 kg	4202 13	Kanister	5 L	4202 33
Kanister	20 L	4202 26	Flaschen	12 x 1 L	4202 87
Kanister	10 L	4202 30			



neodisher® SystemSpecial

**Saure Reinigungs- und Neutralisationskomponente – Flüssigkonzentrat –
Auf Basis organischer Säuren. Frei von Tensiden und Phosphaten**

Zum optionalen Einsatz bei der maschinellen Aufbereitung mit neodisher SystemAct und neodisher SystemClean. Beugt dem Aufbau mineralischer Beläge vor. Die Dosierung erfolgt über das speziell für die Dosierung von Hochkonzentraten entwickelte Komponentendosiersystem weigomatic system ALPHA in den Neutralisationsschritt des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts.

Kanister mit RFID ⁴	2 x 5 L	4214 37
--------------------------------	---------	---------

Komponente für
neodisher
system
ALPHA



* Geprüft gem. Methodenvorschlag von J. Bertram, M. Mielke, M. Beekes, K. Lemmer, M. Baier, G. Pauli: Inaktivierung und Entfernung von Prionen bei der Aufbereitung von Medizinprodukten, Ein Beitrag zur Prüfung und Deklaration geeigneter Verfahren, Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 2004 • 47:36–40



Medizinprodukte und Zubehör Nachspülung

Nachspülung	neodisher® MediKlar	neodisher® MediKlar special	neodisher® MediDry special	neodisher® SystemRinse
streifenfreie Trocknung	●	●	●	●
sauer		●	●	
tensidfrei			●	
geeignet für Kunststoffe		●	●	
geeignet für PSU, PPSU			●	

neodisher® MediKlar

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat –

Für die schnelle und fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesie-Utensilien, Instrumentencontainern, flexiblen Endoskopen und Implantaten sowie Babyflaschen. Verkürzt die Trocknungszeit signifikant.

Fass	200 kg	4045 13	Kanister	10 L	4045 30
Fass mit RFID ⁴	200 kg	4045 14	Kanister	5 L	4045 33
Kanister	20 kg	4045 26			



neodisher® MediKlar special

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat –

Für die schnelle und fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesie-Utensilien, Instrumentencontainern und Implantaten sowie Babyflaschen. Neutralisiert verschleppte Alkalireste und reduziert die Fleckenbildung bei Einsatz von enthärtetem Wasser in der Schlusspülung.

Fass	200 kg	4073 13	Kanister	5 L	4073 33
Fass mit RFID ⁴	200 kg	4073 14	Flaschen	12 x 1 L	4073 49
Kanister	20 kg	4073 26			



neodisher® MediDry special

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat –

Speziell für die Nachspülung von Medizinprodukten aus Kunststoffmaterialien, insbesondere für Zubehörteile von Anästhesieutensilien aus Polysulfon (PSU) und Polyphenylsulfon (PPSU) wie z. B. Konnektoren von Larynxmasken, Adaptoren und Containerdeckel. Auch für andere Medizinprodukte wie z. B. chirurgische Instrumente geeignet. Unterstützt die Trocknung, neutralisiert verschleppte Alkalireste und reduziert die Fleckenbildung bei Einsatz von enthärtetem Wasser in der Schlusspülung.

Kanister	10 L	4571 30
----------	------	---------



neodisher® SystemRinse

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat –

Für die schnelle und streifenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten inkl. MIC-Instrumenten und Mikroinstrumenten, Anästhesie-Utensilien, Containern und anderen medizintechnischen Utensilien. Verkürzt die Trocknungszeit deutlich. Die Dosierung erfolgt über das speziell für die Dosierung von Hochkonzentraten entwickelte Komponentendosiersystem weigomatic® system ALPHA.

Kanister mit RFID ⁴	2 x 5 L	4126 37
--------------------------------	---------	---------

Komponente für
neodisher
system
ALPHA



Medizinprodukte und Zubehör Pflege und Intensivreinigung

neodisher® IP Konz

Instrumentenpflegemittel – Flüssigkonzentrat – Auf Basis von Emulgatoren und medizinischem Weißöl

Zur Dosierung in die Schlusspülung bei der maschinellen Aufbereitung. Beeinflusst eine nachfolgende Dampfsterilisation nicht. Toxikologisch unbedenklich.

Kanister	5 L	4306 33
----------	-----	---------



neodisher® IP Spray

Instrumentenpflegemittel – Spray – Auf Basis von medizinischem Weißöl

Zur gezielten manuellen Pflege von Gelenkinstrumenten nach der maschinellen Aufbereitung. Bewirkt keine Verkrustungen, beeinflusst eine nachfolgende Dampf- oder Heißluftsterilisation nicht. Toxikologisch unbedenklich.

Spraydose	12 x 400 ml	4304 90
-----------	-------------	---------



neodisher® IR

Saurer Intensivreiniger – Flüssigkonzentrat –

Für die Intensivreinigung von chirurgischen Instrumenten aus Edelstahl im Tauch- und Ultraschallbad. Anlauf- und Flug- und Fremdrost werden entfernt. Vor dem Einsatz Produktmerkblatt beachten.

Kanister	8,7 L	4204 30	Flaschen	12 x 1 L	4204 49
----------	-------	---------	----------	----------	---------





Medizinprodukte und Zubehör Manuelle Reinigung

Reinigung	neodisher® MediClean advanced	neodisher® MediClean forte	neodisher® MultiZym	neodisher® LM 2	neodisher® MediClean
manuell	●	●	●	●	●
maschinell	●	●			●
mildalkalisch	●	●		●	●
enzymatisch	●	●	●		●

neodisher® MediClean advanced

Mildalkalischer Universalreiniger – flüssiges Hochkonzentrat – Enthält Alkalitätsspender, Enzyme und Tenside

Hochkonzentrat mit besonders starker Reinigungsleistung bei geringem Produktbedarf. Verleiht dem Instrumentarium Brillanz und Strahlkraft. Entfernt stumpfe Beläge und sorgt somit langfristig für eine optimale Haptik des Instrumentariums. Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung. Exzellente Materialverträglichkeit und damit materialschonend.

Fass	220 kg	4130 13	Kanister*	5 L	4130 33
Kanister	20 L	4130 26	Kanister*	5 L	4130 35
Kanister	10 L	4130 30	Flaschen	6 x 2 L	4130 42



neodisher® MediClean forte

Mildalkalischer Universalreiniger – Flüssigkonzentrat – Enthält Alkalitätsspender, Enzyme und Tenside

Exzellente Materialschonung, universell einsetzbar. Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut. Vermeidet eine Wiederablagerung von Proteinrückständen. Zur manuellen und maschinellen Reinigung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Container	1000 kg	4050 03	Kanister	10 L	4050 30
Container	600 kg	4050 09	Kanister*	5 L	4050 33
Fass	220 kg	4050 13	Kanister*	5 L	4050 35
Fass mit RFID ⁴	220 kg	4050 14	Flaschen	6 x 2 L	4050 42
Kanister	20 L	4050 26			



neodisher® MultiZym

Multienzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – Frei von Borsäure und Boraten, parfüm- und farbstofffrei

Erstklassige Reinigungsleistung durch multienzymatische Formulierung. Aktive rückstandsfreie Reinigung, verhindert die Redeposition von Proteinrückständen. Entfernt Biofilme. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. pH-neutral.

Kanister	5 L	4087 35	Flaschen	12 x 1 L	4087 44
----------	-----	---------	----------	----------	---------



neodisher® LM 2

Mildalkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –

Für die Reinigung von chirurgischen Instrumenten im Ultraschall- und Tauchbad. Schaumarm.

Flaschen	12 x 1 L	4403 44	Kanister	10 L	4403 30
----------	----------	---------	----------	------	---------



neodisher® MediClean

Mildalkalischer, enzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –

Sehr gute Reinigungswirkung mit perfekter Materialschonung wie sie üblicherweise nur mit pH-neutralen Produkten erreicht wird.

Fass	220 kg	4043 13	Kanister	10 L	4043 30
Kanister	20 L	4043 26	Kanister	5 L	4043 33



Desinfektion	neodisher® Septo Plus	neodisher® Septo Active*	neodisher® Septo Fin*
flüssig	●		●
aldehydfrei	●	●	
bakterizid	●	●	●
tuberkulozid		●	●
mykobakterizid		●	●
levurozid	●	●	●
fungizid		●	●
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	●	●	●
viruzid		●	●
sporizid / C. difficile		●	●

* auch geeignet zur Schlussdesinfektion semikritischer Medizinprodukte

Medizinprodukte und Zubehör Manuelle Desinfektion

neodisher® Septo Plus

Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat –

Auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen – Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (0,5 %, 15 min, 20 °C)

Für die manuelle Reinigung und Desinfektion sowie für die desinfizierende Vorreinigung im Tauch- bzw. Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung. Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. Frei von Aldehyden und Aminen. Kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln. VAH₁-gelistet und in der IHO₂-Desinfektionsmittelliste eingetragen.

Kanister	5 L	4209 35	Flaschen	12 x 1 L	4209 44
----------	-----	---------	----------	----------	---------



neodisher® Septo Active

Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Granulat –

Auf Basis von Peressigsäure – Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid gegen C. difficile (2,0 %, 15 min, 20 °C), sporizid (2,0 %, 60 min, 20 °C)

Zur manuellen Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten und für die manuelle desinfizierende Reinigung im Tauch- oder Ultraschallbad. Frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen (QAV). VAH₁-gelistet, in der IHO₂-Desinfektionsmittelliste eingetragen, ÖGHMP₃-gelistet.

Eimer	8 kg	4098 76	Eimer	4 x 2 kg	4098 81
-------	------	---------	-------	----------	---------

Mit den Teststäbchen neodisher® test strips (Art.Nr. 981320) kann die Konzentration der Anwendungslösung überprüft werden.



neodisher® Septo Fin

Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat –

Auf Basis von Aldehyden – Bakterizid, fungizid, mykobakterizid, viruzid, sporizid gegen C.difficile (4,0%, 24 h, 20°C)

Zum Einsatz im Tauchbad. Frei von Formaldehyd und Glyoxal. Sehr gute Materialverträglichkeit. VAH₁-gelistet, in der IHO₂-Desinfektionsmittelliste eingetragen, ÖGHMP₃-gelistet.

Kanister	5 L	4207 35	Flaschen	6 x 2 L	4207 42
----------	-----	---------	----------	---------	---------





Flexible Endoskope Vorbehandlung

Vorbehandlung	neodisher endo® CLEAN	neodisher endo® MED	neodisher endo® DIS active
reinigend	●	●	●
desinfizierend		●	●*
pH-neutral		●	●
kompatibel mit Aldehyden	●	●	●
flüssig	●	●	

* auch geeignet zur Schlussdesinfektion semikritischer Medizinprodukte

neodisher endo® CLEAN

Mildalkalisches Reinigungsmittel für die maschinelle und manuelle Aufbereitung von flexiblen Endoskopen – Flüssigkonzentrat – Auf Basis von Alkalitätsspendern, Enzymen und Tensiden

Für die manuelle Reinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium im Tauch- bzw. Ultraschallbad. Ausgezeichnete Reinigungswirkung. Bewirkt eine starke Abreicherung von organischen Rückständen und verhindert deren Redeposition. Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut. Sehr gute Materialverträglichkeit; für die Endoskope aller führenden Hersteller geeignet.

Fass	220 kg	4074 13	Kanister	10 L	4074 30
Fass mit RFID ⁴	220 kg	4074 14	Kanister	5 L	4074 33
Kanister	20 L	4074 26	Flaschen	6 x 2 L	4074 42



neodisher endo® MED

Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur manuellen Vorbehandlung von flexiblen Endoskopen – Flüssigkonzentrat – Auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen – Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (1,0 %, 15 min, 20 °C)

Für die desinfizierende Vorreinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium im Tauch- oder Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung. Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. Frei von Aldehyden und Alkylaminen. Kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln. VAH¹-gelistet und in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen.

Kanister	5 L	4210 35	Flaschen	12 x 1 L	4210 44
----------	-----	---------	----------	----------	---------



neodisher endo® DIS active

Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen – Granulat – Auf Basis von Peressigsäure – Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (1,0 %, 5 min, 20 °C), sporizid gegen C. difficile (1,0 %, 15 min, 20 °C)

Für die desinfizierende Vorreinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium im Tauch- oder Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung. pH-neutral. Gute Reinigungsleistung, nachweislich nicht proteinfixierend^{**}. Sehr gute Materialverträglichkeit; für die Endoskope aller führenden Hersteller geeignet. Frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen (QAV). VAH¹-gelistet, in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen, ÖGHMP³-gelistet.

Eimer	8 kg	4077 76	Sachets	25 x 100 g	4077 79
Eimer	4 x 2 kg	4077 81			

Mit den Teststäbchen neodisher® test strips (Art.Nr. 981320) kann die Konzentration der Anwendungslösung überprüft werden.



Reinigung

Reinigung	neodisher endo® CLEAN
manuell	●
maschinell	●
mildalkalisch	●
enzymatisch	●
tensidhaltig	●

Flexible Endoskope Maschinelle Reinigung

Komponente für
neodisher
system ALPHA

neodisher endo® CLEAN

Mildalkalisches Reinigungsmittel für die maschinelle und manuelle Aufbereitung von flexiblen Endoskopen – Flüssigkonzentrat – Auf Basis von Alkalitätsspendern, Enzymen und Tensiden

Für die Reinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG-E). Ausgezeichnete Reinigungswirkung. Erfüllt die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Institutes (RKI) für die Aufbereitung von Medizinprodukten zur Minimierung des Risikos einer Übertragung der neuen Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK). Bereits bei niedrigen Temperaturen wirksam. Schaumarme Formulierung – keine Beeinträchtigung der Reinigungsleistung durch Schaumentwicklung. Sehr gute Materialverträglichkeit; für die Endoskope aller führenden Hersteller geeignet.

Wird neodisher endo® CLEAN auch zur manuellen Vorreinigung verwendet, ist vor dem maschinellen Aufbereitungsschritt kein Abspülen der Reinigerlösung erforderlich.

Fass	220 kg	4074 13	Kanister mit RFID ⁴	2 x 5 L	4074 37
Fass mit RFID ⁴	220 kg	4074 14	Kanister	5 L	4074 33
Kanister	20 L	4074 26	Flaschen	6 x 2 L	4074 42
Kanister	10 L	4074 30			





Flexible Endoskope Maschinelle Desinfektion

Desinfektion	neodisher endo [®] SEPT GA*	neodisher endo [®] SEPT PAC*	neodisher endo [®] DIS active*
maschinell	●	●	
manuell			●
aldehydfrei		●	●
bakterizid	●	●	●
tuberkulozid	●	●	●
mykobakterizid	●	●	●
levurozid	●	●	●
fungizid	●	●	●
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	●	●	●
viruzid	●	●	●
sporizid (inkl. C. difficile)	● **	●	●

* auch geeignet zur Schlussdesinfektion semikritischer Medizinprodukte
** im Aufbereitungsverfahren mit neodisher endo[®] CLEAN wirksam gegen Sporen von Clostridium difficile

Flexible Endoskope Manuelle Desinfektion

neodisher endo[®] DIS active

Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen – Granulat –
Auf Basis von Peressigsäure – Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid gegen C. difficile (2,0 %, 15 min, 20 °C),
sporizid (2,0 %, 60 min, 20 °C)

Für die manuelle Desinfektion von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium.
Sehr gute Materialverträglichkeit; für die Endoskope aller führenden Hersteller geeignet. Angenehmer Geruch
(parfümfrei), pH-neutral. Frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen (QAV). VAH¹-gelistet,
in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen, ÖGHMP³-gelistet.

Eimer	8 kg	4077 76	Sachets	25 x 100 g	4077 79
Eimer	4 x 2 kg	4077 81			

Mit den Teststäbchen neodisher[®] test strips (Art.Nr. 981320) kann die Konzentration der Anwendungslösung überprüft werden.



neodisher endo[®] SEPT GA

Desinfektionsmittel zur maschinellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen – Flüssigkonzentrat –
Auf Basis von Glutaraldehyd – Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid (1%, 55 °C, 5 min)
Im Verfahren mit neodisher endo[®] CLEAN wirksam gegen Sporen (inkl. C. difficile)

Für die Desinfektion von flexiblen Endoskopen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG-E). Besonders
anwenderfreundlich durch geruchsarme Formulierung. Sehr gute Materialverträglichkeit; für die Endoskope
aller führenden Hersteller geeignet. Frei von Formaldehyd und quartären Ammoniumverbindungen (QAV).
In der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Die Produkte neodisher endo[®] CLEAN und neodisher endo[®] SEPTGA
sind optimal aufeinander abgestimmt: Eine mögliche Verschleppung der Reinigerflotte von neodisher endo[®]
CLEAN in den Desinfektionsschritt führt nicht zu einer Beeinträchtigung der Desinfektionsleistung von neodisher
endo[®] SEPTGA. Das maschinelle Aufbereitungsverfahren mit neodisher endo[®] CLEAN und neodisher endo[®]
SEPTGA erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 15883-4 hinsichtlich einer Gesamtkeimreduktion von >9 log
Stufen im Gesamtprozess.

Fass	200 kg	4071 13	Kanister	10 L	4071 30
Fass mit RFID ⁴	200 kg	4071 14	Kanister	5 L	4071 33
Kanister	20 L	4071 26	Kanister mit RFID ⁴	2 x 5 L	4071 37



neodisher endo[®] SEPT PAC

Desinfektionsmittel zur maschinellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen – Flüssigkonzentrat –
Auf Basis von Peressigsäure – Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid gegen C. difficile (1%, 35 °C, 5 min)

Für die Desinfektion von flexiblen Endoskopen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG-E). Schnelle und
umfassende Wirksamkeit inkl. Sporizidie bei 25 °C und bei 35 °C. Kein Aktivator erforderlich, nur eine Komponente. Für
die Endoskope aller führenden Hersteller geeignet – Materialverträglichkeit in mehreren Millionen Zyklen bestätigt. Frei
von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen (QAV). In der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Die
Produkte neodisher endo[®] CLEAN und neodisher endo[®] SEPTPAC sind optimal aufeinander abgestimmt: Eine mög-
liche Verschleppung der Reinigerflotte von neodisher endo[®] CLEAN in den Desinfektionsschritt führt nicht zu einer
Beeinträchtigung der Desinfektionsleistung von neodisher endo[®] SEPTPAC. Das maschinelle Aufbereitungsverfahren
mit neodisher endo[®] CLEAN und neodisher endo[®] SEPTPAC erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 15883-4
hinsichtlich einer Gesamtkeimreduktion von >9 log Stufen im Gesamtprozess.

Kanister	4,75 L	4075 35	Kanister mit RFID ⁴	2 x 4,75 L	4075 37
----------	--------	---------	--------------------------------	------------	---------





Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen

Übersicht	neodisher® SBR extra	neodisher® SBN plus	neodisher® SBK	neodisher® SBX
Reinigung	●			
Härteabbindung		●	●	●
Nachspülung		●	●	●
schaumdämpfend			●	●
alle Wasserhärten	●	●	●	●

neodisher® SBR extra

Reiniger – Flüssigkonzentrat –

Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Kalkseifenränder und Rückstände von Cytostatika aus menschlichen Ausscheidungen. Geeignet für Steckbeckenspüler, die mit entsprechender Dosierpumpe ausgestattet sind.

Kanister	5 L	4007 33	Kanister	5 L	4007 35
----------	-----	---------	----------	-----	---------



neodisher® SBN plus

Kombiniertes Härteabbinde- & Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat – Auf Basis von organischen Säuren und Tensiden

Verhindert wirkungsvoll Kalkablagerungen im Dampferzeuger, in Rohrleitungen und Düsen auch bei hohen Wasserhärten. Für eine optimierte, schnelle und fleckenfreie Trocknung. Für säurebeständige Steckbeckenspüler geeignet. Angenehmer Frischduft.

Kanister	5 L	4792 35
----------	-----	---------



neodisher® SBK

Kombiniertes Härteabbinde- & Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat – Auf Basis organischer Säuren

Verhindert wirkungsvoll Kalkablagerungen im Dampferzeuger, in Rohrleitungen und Düsen auch bei hohen Wasserhärten. Unterstützt die schnelle und fleckenfreie Trocknung. Schaumdämpfend. Für säurebeständige Steckbeckenspüler geeignet.

Fass	200 kg	4006 13	Kanister	5 L	4006 35
------	--------	---------	----------	-----	---------



neodisher® SBX

Härteabbindemittel – Flüssigkonzentrat –

Zur Vermeidung von Kalkablagerungen im Dampferzeuger. Für alle Steckbeckenspüler geeignet.

Kanister	5 L	4015 35
----------	-----	---------



Aufbereitung von Bettgestellen und OP-Tischen

neodisher® Dekonta AF*

Kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat – Frei von Aldehyden – Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid

Für die maschinelle Aufbereitung von Bettgestellen, Instrumentencontainern und OP-Liegen sowie Transportwagen und OP-Schuhen in Dekontaminationsanlagen. Schnelle Wirksamkeit und hohe Materialschonung. In der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Zur kombinierten maschinellen Reinigung und Desinfektion von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Container	590 kg	4018 09	Fass mit RFID ⁴	200 kg	4018 14
Fass	200 kg	4018 13	Kanister	20 L	4018 26



neodisher® TN

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat –

Für eine verbesserte Trocknung von schwer benetzbaren Materialien wie z.B. Kunststoffen bei der maschinellen Aufbereitung von Bettgestellen und Transportwagen in Dekontaminationsanlagen, pH-neutral.

Fass	200 kg	3115 13	Kanister	20 kg	3115 26
------	--------	---------	----------	-------	---------



neodisher® MediKlar special

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat –

Für die schnelle und fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von Instrumentencontainern und Bettgestellen. Neutralisiert verschleppte Alkalireste und reduziert die Fleckenbildung bei Einsatz von enthärtetem Wasser in der Schlusspülung.

Fass	200 kg	4073 13	Kanister	5 L	4073 33
Fass mit RFID ⁴	200 kg	4073 14	Flaschen	12 x 1 L	4073 49
Kanister	20 kg	4073 26			





Flächenreinigung und Flächendesinfektion

neoform® Classic*

**Desinfektionsreiniger – Flüssigkonzentrat –
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS**

Zur täglichen, schlierenfreie Flächendesinfektionsreinigung im Wischverfahren auf abwaschbaren Oberflächen von Medizinprodukten und medizinischem Inventar, anderen Oberflächen in Krankenhäusern und Praxen sowie abwaschbaren Oberflächen in Alten- und Pflegeheimen, Laborbereichen und im öffentlichen Bereich. Gute Reinigungsleistung, sehr gute Materialverträglichkeit. VAH¹-gelistet und in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Auch zur Anwendung im Dr. Weigert Tuchspendersystem neoform® wipex RTFgeeignet.



Kanister	5 L	4470 35	Flaschen	6 x 2 L	4470 42
----------	-----	---------	----------	---------	---------

neoform® MED FF*

**Desinfektionsreiniger – Flüssigkonzentrat –
Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid, sporizid gegen C. difficile**

Für die Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und medizinischem Inventar. Einsatz im Wischverfahren. VAH¹-gelistet und in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Auch zur Anwendung im Dr. Weigert Tuchspendersystem neoform® wipex RTFgeeignet.



Kanister	5 L	4057 35
----------	-----	---------

neoform® Active*

**Desinfektionsreiniger – Granulat –
Auf Basis von Peressigsäure – Bakterizid, fungizid, mykobakterizid, viruzid, sporizid**

Für die Reinigung und Desinfektion von Flächen im Medizin-, Pflege- und Laborbereich. Kurze Einwirkzeiten, breites Wirkspektrum. Gute Reinigungsleistung, nicht proteinfixierend, sehr gute Materialverträglichkeit. Staubarm, gut löslich – saubere, präzise und einfache Dosierung. VAH¹-gelistet und in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen.



Eimer	4 x 2 kg	4471 81	Sachets	40 x 50 g	4471 75
-------	----------	---------	---------	-----------	---------

Mit den Teststäbchen neodisher® test strips (Art.Nr. 981320) kann die Konzentration der Anwendungslösung überprüft werden.

neoform® Rapid*

**Schnelldesinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung –
Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS**

Alkoholische Lösung zur Desinfektion von Flächen im Medizin-, Labor-, Pharma- und Kosmetikbereich. Einsatz im Wischverfahren. VAH¹-gelistet und in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Auch zur Anwendung im Dr. Weigert Tuchspendersystem neoform® wipex RTFgeeignet.



Flaschen	12 x 0,75 L	5643 47
----------	-------------	---------

neoform® wipex RTF

Einweg-Vliestuchspendersystem für den Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln

Desinfizierende Reinigung und Desinfektion von Flächen, Geräten, Medizinprodukten und medizinischem Inventar mit geeigneten Dr. Weigert-Flächendesinfektionsmitteln in Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, in chemischen und pharmazeutischen Bereichen, Laboratorien sowie in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben und Großküchen. Auch für Hochrisikobereiche wie z. B. Neonatologie oder Hämatonkologie gemäß VAH¹-Empfehlung³. Kompatibel mit einer breiten Auswahl an Dr. Weigert Flächendesinfektionsmitteln, im 4-Felder-Test belegt (EN 16615).



Tuchspender mit Vliestuchrolle	8 Stück	4213 95
--------------------------------	---------	---------

Händehygiene

triformin® wash Waschlotion

Zur pflegenden Hände- und Körperreinigung. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Besonders geeignet für normale, trockene und empfindliche Haut. Auf Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe, mit Aloe Vera und natürlichem Bienenhonig. Seifen- und alkalifrei. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 und den triformin® dispenser 0.5.

Kanister	5 L	3173 35	Flaschen	20 x 500 ml	3173 63
Flaschen	10 x 1 L	3173 48			



triformin® wash pure Waschlotion

Zur pflegenden Hände- und Körperreinigung. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Besonders geeignet für normale und trockene Haut. Parfüm- und farbstofffrei, mit rückfettenden Pflegekomponenten und feuchtigkeitsspendendem Glycerin. Seifen- und alkalifrei. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 und den triformin® dispenser 0.5.

Kanister	5 L	3183 35	Flaschen	20 x 500 ml	3183 63
Flaschen	10 x 1 L	3183 48			



weigoman® ** Händedesinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung –

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Rota- und Noroviren

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut. Hervorragende Hautverträglichkeit, mit hochwirksamen und synergistisch wirkenden Rückfetttern. Für sensible Haut geeignet. VAH¹-gelistet, in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 und den triformin® dispenser 0.5.

Kanister	5 L	4090 35	Flaschen	20 x 500 ml	4090 63
Flaschen	10 x 1 L	4090 48			



weigoman® parfümfrei** Händedesinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung –

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Rota- und Noroviren

Parfümfreies alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut. Hervorragende Hautverträglichkeit, mit hochwirksamen und synergistisch wirkenden Rückfetttern. Für sensible Haut geeignet. VAH¹-gelistet, in der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 und den triformin® dispenser 0.5.

Kanister	5 L	4091 35	Flaschen	20 x 500 ml	4091 63
Flaschen	10 x 1 L	4091 48	Flaschen	50 x 100 ml	4091 65



weigoman® pure* Händedesinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung –

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Noroviren

Parfümfreies alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut. Hervorragende Hautverträglichkeit, mit hochwirksamem Rückfetter. Für sensible Haut geeignet. In der IHO²-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 und den triformin® dispenser 0.5.

Flaschen	10 x 1 L	4078 48	Flaschen	50 x 100 ml	4078 65
Flaschen	20 x 500 ml	4078 63			



triformin® care Hautpflegecreme

Zur Pflege der Hände nach der Arbeit und in Pausen. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Frei von Parfüm. Dosierung aus der 500 ml-Flasche über den triformin® dispenser 0.5.

Flaschen	6 x 500 ml	3105 39	Tuben	12 x 100 ml	3105 15
----------	------------	---------	-------	-------------	---------



triformin® protect Hautschutzcreme

Schützt die Haut nachhaltig vor Austrocknung. Langanhaltender Schutz und intensive Pflege. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Frei von Parfüm. Dosierung aus der 500 ml-Flasche über den triformin® dispenser 0.5.

Flaschen	6 x 500 ml	3102 39	Tuben	12 x 100 ml	3102 15
----------	------------	---------	-------	-------------	---------



** weigoman/ weigoman parfümfrei: Zusammensetzung: 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut enthält 63,14 g 2-Propanol und 14,3 g 1-Propanol. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Glycerol, Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxethylen)-75. Bei weigoman zusätzlich: Parfümöl Fresh. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, ein unter „Nebenwirkungen“ genanntes Allergen oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht im Augenbereich, auf Schleimhäuten oder offenen Wunden anwenden. Nebenwirkungen: Austrocknungserscheinungen der Haut (Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) bei mehrfacher Anwendung. Kontaktallergische Reaktionen bzw. Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich. 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, 2-Benzylidenheptanal, 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 3-Phenylprop-2-en-1-ol, Citral, Citronellol, Cumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, 2-Benzylidenoctanal, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, Isoeugenol, D-Limonen und Linalool sind im Duftstoff enthalten und können allergische Reaktionen hervorrufen. Warnhinweise: Enthält Wollwachs und einen Duftstoff mit Allergenen. Pharmazeutischer Unternehmer: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg. Hersteller: A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Str. 16, 21337 Lüneburg. Stand der Information: September 2020.

FIRMA AARONCLEAN
INH. DOMINIK AARON HAIDER

Römerstraße 32 Lagerhalle 30
A-2752 Wöllersdorf-Steinabrückl
Österreich

E-Mail: office@aaronclean.at
UID: ATU65522507

Bankverbindung:
BAWAG PSK
IBAN: AT851400004010927779
BIC: BAWAATWW